



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Buggy basculante y reclinable BUG

ref: BUG

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/buggys-y-sillas-infantiles/buggy-basculante-y-reclinable-bug>



La silla basculante que crece con el niño. Con 2 tallas incluye 4 medidas (2 por talla) y un amplio rango de regulación. La silla BUG es segura, ligera, manejable, compacta y fácil de personalizar. Está pensada para la mamá y el niño.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### **SISTEMA MODULAR:**

El asiento de la silla Bug tiene la posibilidad de ser usado en cuatro bases distintas (una para uso en exteriores y tres para uso en interiores).





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



El único buggy con el sistema de basculación incorporado a la silla y no en el carro, de tal manera que la postura de la silla no debe volverse a acomodar después de extraerla del carro.

Mediante dos pistones de gas es posible regular la reclinación y basculación de la silla de una manera continua, sin dentados ni cremalleras, con una sola mano.

### **SISTEMA DE PLEGADO:**

Fácil de plegar en cuestión de segundos. El asiento no pierde las regulaciones que se han configurado inicialmente.



**Ayudas Dinámicas®**


Productos para una mayor independencia



Asiento desenganchado



Cochecito cerrado con asiento introducido

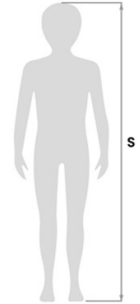

## MEDIDAS Y TALLAS:

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (grados)	J (grados)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Q (cm)	R (cm)	S (cm)	Capacidad máx.	Peso chasis	Peso asiento	Peso total
Small	20-30	52-62	37	52	20-30	14-30	0°-35°	35°	100-110	57	67-96	35	88	33	82	50	81	90-120	35 kg	9,5 kg	8,5 kg	18 kg
Medium	25-36	60-75	46	55	30-40	20-38	5°-30°	40°	112-127	62	80-107	37	112	39	94	52	94	115-140	45 kg	11 kg	12,7 kg	23,7 kg

Los números separados con un guión indican una regulación mínima y una regulación máxima





## ACCESORIOS OPCIONALES:



**863 Apoyacabezas**  
con protecciones occipitales-parietales, regulable en altura, anchura, inclinación y en anterior-posterior.



**852 Apoyacabezas**  
con protecciones parietales, regulable en altura y anchura.



**942 Apoyacabezas ergonómico**  
Regulable en altura, inclinación y entero-posterior con polias regulables. También disponible en talla L, para casos particulares.



**868 Soportes de tronco con unión** (envolventes), regulables en altura y anchura.



**834 Taco abductor acolchado**  
regulable en profundidad.



**834R Taco abductor acolchado**  
regulable en profundidad y abducción.



**835 Apoyacabezas moldeado**



**934 Enganche para apoyacabezas** en suspensión. Disponible solo para apoyacabezas 863.



**838 Soportes torácicos**  
regulables en altura y anchura.



**853 Chaleco**



**903 Chaleco de seguridad 5 puntos**



**906 Tirante de seguridad 5 puntos**



**894 Cinturón pélvico de 45°**



**820 Cinturón de cuatro puntos**



**827 Correas para pies**



**905 Freno manual**  
para base 869.



**935 Soporte para botella de oxígeno 863**  
Dimensiones máximas de la botella de oxígeno: altura 600 mm (incluida inclusión) y diámetro 140 mm. El chasis se plega sin quitar el accesorio.



**911 Bandeja porta respirador**  
para base 863. El chasis se plega sin quitar el accesorio.



**839 Barra de apoyo frontal**  
Regulable en inclinación.



**824 Mesa transparente**  
Envolvente con escotadura. Regulable en inclinación.



**824B Mesa para base de interior**  
Fabricado con material resistente e higiénico, diseño sin bordes que no atrapa residuos de comida.



**819 Capota**  
combinada con la tapicería. Resistente y fácilmente regulable.



**825 Funda para lluvia**  
(para fijar en la capota 819) para base 869.



**818 Funda térmica**



**892 Tapizado para reposapiés**  
acolchado y removible.



**854 Sombrella**  
para base 869, combinada con la tapicería.



**858 Cesta para base 869**



**921 Plataforma para transporte de segundo pasajero**  
Posicionada detrás del cochecito. Para base 869. Para niños de al menos 15 meses de edad. Capacidad máxima 20 kg.



**922 Porta botellas**  
para base 869.



**891 Anclajes (4 anillos)**  
Para el transporte en dirección del sentido de la marcha en vehículos en movimiento (coches privados, autobuses, homologados...). Solo para base 869. Véase manual de uso y mantenimiento suministrado con el oxígeno.