



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas basculante plegable de aluminio VIP

ref: AD819.

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-posicionamiento-basculantes/silla-de-ruedas-basculante-plegable-de-aluminio-vip>



Con esta ligera silla de aluminio podrá disfrutar de la comodidad y las ventajas de una silla basculante sin renunciar a la facilidad para transportar una silla convencional. VIP se pliega en un instante y es fácil de transportar, cabe en cualquier maletero.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



PLEGABLE

La única silla de aluminio basculante **plegable** del mercado.

Una vez plegada cabe en el maletero de prácticamente cualquier coche.





SUPER LIGERA

Fabricada en aluminio de aviación, solo pesa 17 Kg. La mayoría de sillas basculantes disponibles actualmente pesan fácilmente más de 30 Kg.



COMFORT Y COMODIDAD

Con esta silla podrá disfrutar del confort de una silla basculante sin renunciar a la movilidad, ligereza y tamaño de una silla de aluminio plegable.

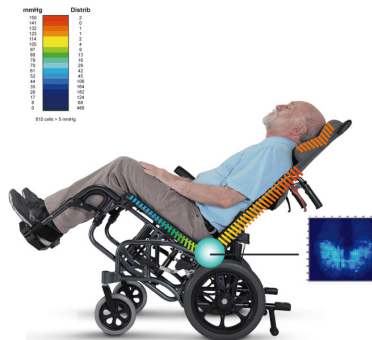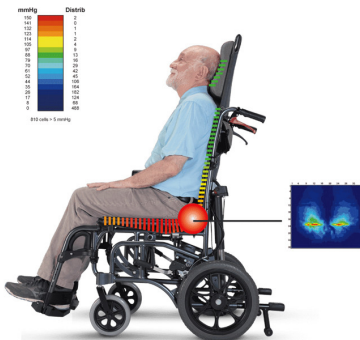

SISTEMA DE BASCULACIÓN

El sistema de basculación permite cambiar la posición del usuario basculando el asiento, desplazando así la presión alejándola de un punto y redistribuyéndola sobre una superficie más grande. Esta característica ayuda a reducir los riesgos de desarrollar úlceras por presión y evitar el dolor de espalda.


El asiento bascula de 0° a 35° repartiendo con eficacia las presiones en una mayor área de superficie, reduciendo el riesgo de úlceras de decúbito. El centro de gravedad se desplaza entre las ruedas delanteras y traseras para conseguir un efecto aliviador de la presión.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

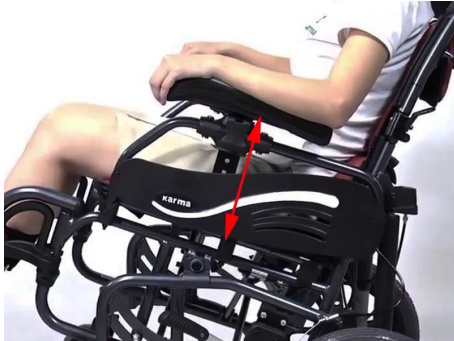

REPOSABRAZOS REGULABLES EN ALTURA

Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines.

BENEFICIOS DE LOS BRAZOS DE ALTURA REGULABLE

Los reposabrazos de la silla de ruedas soportan el antebrazo del paciente sentado, y así descansan los hombros. El hombro es especialmente vulnerable a las lesiones porque la cápsula de la articulación (la de mayor rango de movimiento del cuerpo) depende del soporte de los músculos circundantes.



FUNDA

Tapizado del respaldo - asiento de doble uso: verano / invierno. La tapicería antimicrobiana inhibe el crecimiento bacteriano y de hongos, elimina el olor y está diseñada para limpieza fácil.



También disponible la versión con reposapiés elevables.

17

115

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Altura asiento	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Reposapiés
--------	---------------	---------------	----------------	---------------	-------------	-------------	------------





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

AD819/41	41 cm	42 cm	50 cm	46 cm	63 cm	107 cm	Estandar
AD819/45	46 cm	42 cm	50 cm	46 cm	68 cm	107 cm	Estandar
AD819/41RE	41 cm	42 cm	50 cm	46 cm	63 cm	107 cm	Elevable
AD819/45RE	46 cm	42 cm	50 cm	46 cm	68 cm	107 cm	Elevable

